

LinKine™ AbFluor™ 594 偶联试剂盒（尤其适合分子量为 6-20 KD 的样本）

Cat #: KTL0541

Size: 3×100 µg/1 mg

	AbFluor™ 594 偶联试剂盒（尤其适合分子量为 6-20 KD 的样本）		
REF	货号：KTL0541	LOT	批号：见产品标签
	适用样本：蛋白质、多肽及其它含游离氨基的配体		
	保质期：-20℃，避光保存 6 个月		

原理

AbFluor™ 是一系列高度水溶性荧光染料，横跨可见光和近红外光谱，可用于标记生物分子，尤其是蛋白质和核酸。不同 AbFluor™ 荧光染料具有不同的核心结构，覆盖了紫外到近红外光谱。我们对 AbFluor™ 染料核心结构进行了创新修饰，使 AbFluor™ 染料的性能优于其它染料。

AbFluor™ 594 是最亮的深红色染料，通过 594 nm 激光激发（AbFluor™ 594 光谱图如图 1），拥有极强光稳定性可替代德克萨斯红、DyLight 594 和 Alexa Fluor 594。AbFluor™ 594 偶联的产物同其它光谱相似染料相比是最亮的。

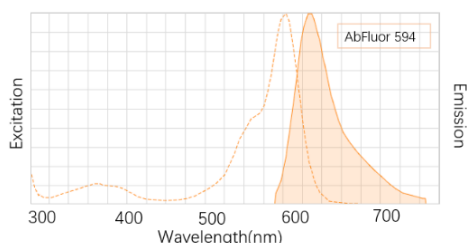


图 1：AbFluor™ 594 光谱图

LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit 可直接在蛋白质、多肽及其它含游离氨基的配体上偶联 AbFluor™ 594 荧光基团。试剂盒中 Activated AbFluor™ 594 solution 已预先活化，可直接用于偶联实验；LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit 里的组分为即用型试剂，可直接用于 AbFluor™ 594 标记实验。

应用举例：偶联的直标一抗在免疫实验中无需二抗，免去繁琐的孵育和洗涤步骤，节省时间。

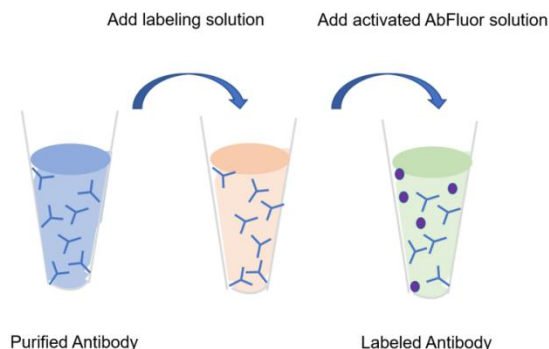


图 2：LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit 原理图

包装清单

试剂盒组分	规格		储存条件
	3×100 µg	1 mg	
Activated AbFluor™ 594 Solution	7.5 µL	25 µL	-20°C, protected from light
AbFluor™ 594 Labeling Solution	15 µL	50 µL	-20°C
Purification Column (0.5 mL, 3 KD)	3	2	RT
Booklet	1	1	RT

注意：该试剂盒所配纯化柱适用于分子量在 6 KD 到 20 KD 的样本；如有未使用完的试剂，请及时密封保存于-20°C。

自备耗材

- 待标记样本
- 移液器和吸头
- 去离子水
- PBS (PH 7.4)

样本制备

待标记样本的初始浓度应高于 2 mg/mL，建议蛋白浓度达到 2.5 mg/mL 以上效果最佳，否则实验前需进行浓缩以提高浓度。待标记样本的组分（或储存缓冲液）应符合如下要求：

- (1) 不含有氨基成分，否则会影响偶联效果。
- (2) 少量 BSA 不会影响偶联效果，但建议使用 PBS 作为缓冲液。
- (3) 若样本中含有可能干扰标记的物质，建议用 PBS 置换缓冲液，具体方法为：将样本加入超滤管中，加入 200-150 µL PBS, 12,000 g、4°C，离心 10 min，弃掉滤液；再次补齐 PBS, 12,000 g、4°C、离心 10 min；离心后取出超滤管内芯，倒置于干净外管中，4,000 g，4°C，离心 2 min，收集置换缓冲液后的样本。

待标记样本的缓冲液应满足如下要求：

pH	6.5-8.0
无胺缓冲液	MES, PBS, HEPES
Chelating Agents (e. g. EDTA)	✓
甘油	< 50%
BSA	< 0.1%
甘氨酸	X
含氨基成分	X

实验步骤

注意：请根据实际样品量，相应放大或缩小试剂盒各组分在反应体系中的体积。

不同规格建议的最适标记样本量和标记体系如下：

规格	最适标记的样本量	最适的标记体系
3×100 µg	3×100 µg	3×50-3×75 µL

1 mg	1 mg	500-750 µL
------	------	------------

以下操作步骤是以 3×100 µg 规格为例，其它规格的试剂用量请进行等比调整。如果需要调整体积，请保持样本量不变更标记体系中 AbFluor™ 594 labeling solution、Activated AbFluor™ 594 solution 和去离子水的体积。

1. 向待标记样本溶液中加入 15 µL AbFluor™ 594 labeling solution，用移液器温和混匀。
2. 吸取 7.5 µL Activated AbFluor™ 594 solution 至步骤 1 反应液中，加去离子水至 150 µL（注：此体积为标记体系），温和混匀，37°C 避光静置 1 h。

注意：步骤 1/2 属于标记步骤。

3. 向步骤 2 反应液中加入适量 PBS（定容至约 500 µL），温和混匀，将溶液移至纯化柱，12,000 g、4°C、离心 10 min。
4. 弃滤液，加适量 PBS（定容至约 500 µL）到纯化柱，4°C、12,000 g、离心 10 min。
5. 取出纯化柱倒置于干净离心管中，4°C、4,000 g、离心 2 min，离心管收集到的溶液即为偶联产物。

注意：步骤 3/4/5 属于纯化步骤；偶联物 4°C 避光条件下可稳定保存一个月。若需长期储存，请分装并于 -20°C 下避光保存，避免反复冻融，可加入同体积甘油。

结果计算

1. 偶联物浓度的计算：

$$C \text{ (mg/mL)} = \{[A_{280} - (A_{\max} \times CF)] / 1.4\} \times \text{稀释因子}$$

其中：C 是指实验收集的偶联物浓度；稀释因子是指在光度测量时的稀释倍数（详见备注）； A_{280} 和 $A_{\max}$ 分别是指在 280 nm 处的吸光度以及在最大吸收波长（AbFluor™ 594 的最大吸收波长为 593 nm）处的吸光度；CF 是校正因子，AbFluor 594™ 的 CF 值为 0.08；1.4 则是指 IgG（mL/mg）的消光系数，AbFluor™ 594 的消光系数为 115,000。

2. 偶联物标记程度（degree of labeling, DOL）的计算：

$$DOL = (A_{\max} \times Mwt \times \text{稀释因子}) / (\epsilon \times C)$$

其中： $A_{\max}$ 指在最大吸收波长处的吸光度（AbFluor™ 594 的最大吸收波长为 593 nm）；稀释因子是指在光度测量时的稀释倍数；C 是指实验收集的偶联物浓度；Mwt 是指待标记样本的分子量； ϵ 是荧光染料的消光系数，AbFluor™ 594 的消光系数为 115,000。

注意：过柱洗脱的偶联物直接用于吸光度检测可能浓度过大，因此需要稀释到适当浓度（蛋白测定仪的浓度范围）。稀释倍数（即稀释因子）需要从起始样本质量以及洗脱得到的偶联物的总体积来进行预估，如未经稀释则稀释因子为 1。

常见问题

问 1：浓缩后样本浓度仍低于 2 mg/mL？

答 1：如果浓缩后样本浓度仍小于 2 mg/mL 可适当调整标记体系的体积，但最终浓度应大于 1 mg/mL。步骤 1 中 AbFluor™ 594 labeling solution 的体积应为标记体系体积的 10%，步骤 2 中可不添加去离子水，Activated AbFluor™ 594 solution 的体积保持不变，您也可以根据自己实验进行适当调整。

问 2：待标记样本分子量大小不同，如何选择合适的纯化柱？

答 2：本产品配备的超滤管适用于分子量为 6 KD-20 KD 的样本。若您需要偶联的样本分子量大于 20 KD，为保证偶联最佳效果，需另行配备大小合适的超滤管。

问 3：待标记样本分子量与 AbFluor™ 594 相近？

答 3：如果样本分子量与 AbFluor™ 594 相近，可在进行完此说明书对应的标记步骤后加入 30 µL 0.5 µM NH_4Cl ，37°C 下孵育 10 min，以淬灭游离的 AbFluor™ 594，无须进行此说明书对应的纯化步骤。

问 4：AbFluor™ 系列荧光染料的相关参数？

答 4：详见如下表格：

名称	最大激发光/发射光 (nm)	消光系数 (ϵ)	校正因子 (Cf)	分子量 (Da)
AbFluor™ 488	490/515	70,000	0.1	~834
AbFluor™ 555	555/565	150,000	0.08	~1077
AbFluor™ 594	593/614	115,000	0.08	~927

AbFluor™ 647	650/665	240,000	0.03	~1258
AbFluor™ 680	680/701	140,000	0.32	~1111

注意事项

1. 不同批次号、不同的厂家的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
2. 混合或复溶组分时，避免产生气泡。如有未使用完的试剂，请及时密封保存于-20℃。
3. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。
4. 保持好的实验习惯，穿戴好手套、实验服、口罩、防目镜等防护工具后再开始实验。

相关产品

Catalog No.	Product Name
KTL0211	LinKine™ FITC 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）
KTL0521	LinKine™ AbFluor™ 488 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）
KTL0121	LinKine™ 生物素 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）
KTL0531	LinKine™ AbFluor™ 555 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）
KTL0561	LinKine™ AbFluor™ 647 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）
KTL0581	LinKine™ AbFluor™ 680 偶联试剂盒（尤其适合分子量 6-20 KD 的样本）

免责声明

本产品仅供科学研究使用，不适用于临床诊断。